

Průvodce rychlým startem Pico 2

Konfigurace aplikace Snuzá Connect:


1. Stáhněte si aplikaci Snuzá Connect
 2. Pro registraci postupujte podle pokynů na obrázcích
 3. Aktivujte svůj účet prostřednictvím e-mailu
 4. Po aktivaci přidejte Pico 2 ke svému účtu
 5. Sériové číslo najdete na boční straně Pico 2 po zvednutí páčky
-

Konfigurace zařízení Snuzá Pico 2:

Nabíjení Snuzá Pico 2

1. Připojte napájecí kabel micro USB k základně nabíječky. Na základně nabíječky se rozsvítí červená kontrolka, která indikuje, že je nabíječka napájena.
 2. Otevřete kryt nabíječky a umístěte Pico 2 do správné polohy.
 3. Zavřete kryt
 4. Indikátor baterie na Pico 2 bude během nabíjení blikat a po plném nabití se rozsvítí zeleně
-

Přípevnění Snuzá Pico 2:

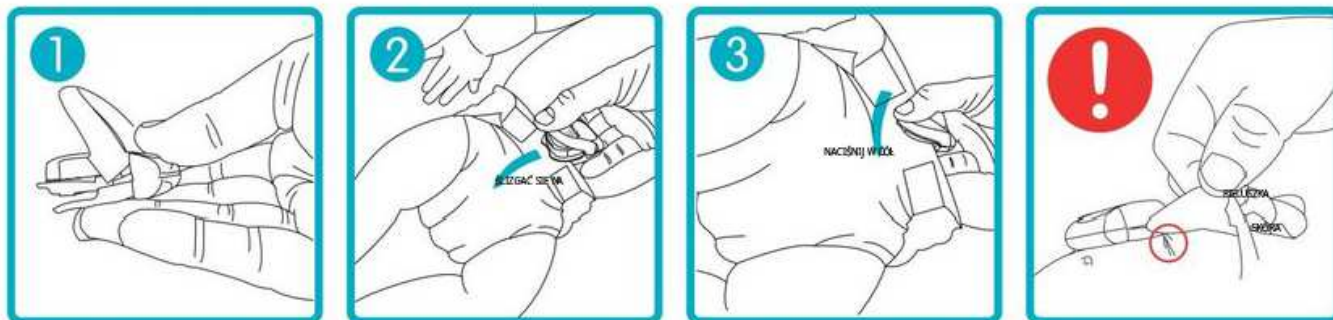


1. Zvednutím horní páčky Pico 2 uvolníte sponu (obr. 1)
2. Přehněte horní okraj plenky a umístěte Pico 2 na plenkou dítěte vložení prstů mezi sponu a pokožku dítěte (obr. 2)
3. Ujistěte se, že je spona po vložení správně uzavřena a že ve sponě není přiskřípnuta žádná kůže (obr. 3)

Zapněte Pico 2 a spustíte monitorování:

1. Zapněte Pico 2 krátkým stisknutím tlačítka napájení
2. Všechny kontrolky budou blikat a uslyšíte pípnutí
3. Alternativně zapněte Pico 2 stisknutím vypínače v aplikaci. Při ovládání přes aplikaci bude zvuk při spuštění tichý.
4. Používejte monitor pouze tehdy, když je dítě ve stacionární - stabilní posteli / postýlce

Naskenujte QR kód pro získání kompletního návodu k použití

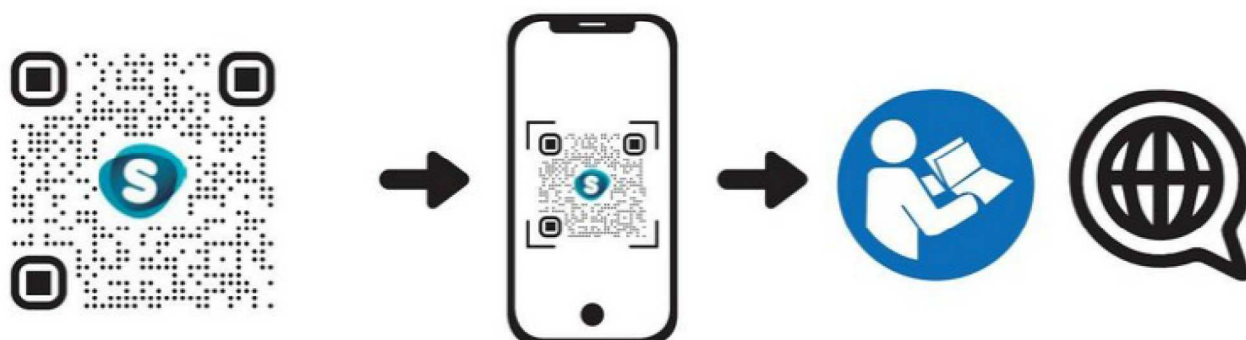

Pro zákaznickou podporu nás prosím kontaktujte na support@snuza.com

Informace o předpisech: Prohlášení o shodě FCC pro Pico a nabíjecí stanici. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření na veřejných nebo nekontrolovaných místech. Kanadské regulační prohlášení pro Pico a nabíjecí stanici. Toto zařízení vyhovuje standardům Industry Canada RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení. ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Toto zařízení splňuje požadavky bezpečnosti související s vystavením rádiovým vlnám v souladu s RSS-102 5. vydání pro podmínky při přenosném použití. Upozornění: Zákazníci používají tento monitor na vlastní riziko. Snuza International (Pty) Ltd, její členové, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé, zástupci, výrobci, distributoři a spolupracovníci ("SNUZA") nenesou odpovědnost za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které zákazník nebo jakákoli jiná osoba utrpí v důsledku spojení s používáním nebo výrobou monitoru, včetně ztráty, poškození nebo zranění zákazníka nebo jakékoli jiné osoby v důsledku jakékoli vady monitoru a jakékoli záruky a jakékoli jiné odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, jsou tímto vyloučeny.

Klient tímto zprošťuje Snuza International (Pty) Ltd této odpovědnosti.

Záruka:

Snuza International (Pty) Ltd zaručuje, že výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od původního data nákupu, doloženého prodejním dokladem.

